




INSTRUKCJA OBSŁUGI

H2-GEN 1800

GENERATOR WODORU


H2

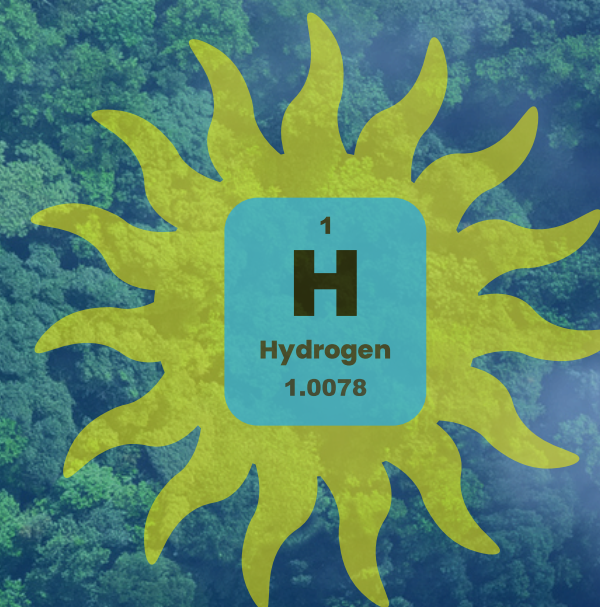


BIOPREZ

INDEKS

- 03** GWARANCJA I SERWIS
- 03** DBAJ O SWOJĄ H2-GEN
- 03** SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- 04** ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- 05** ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- 06** JAK KORZYSTAĆ Z H2-GEN
- 07** KONFIGURACJA WSTĘPNA
- 09** WŁĄCZ I DODAJ WODY
- 10** ODPROWADŹ WODĘ
- 11** DODATKOWE WSKAZÓWKI UŻYTKOWNIKA
- 12** ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY OCHRONNE

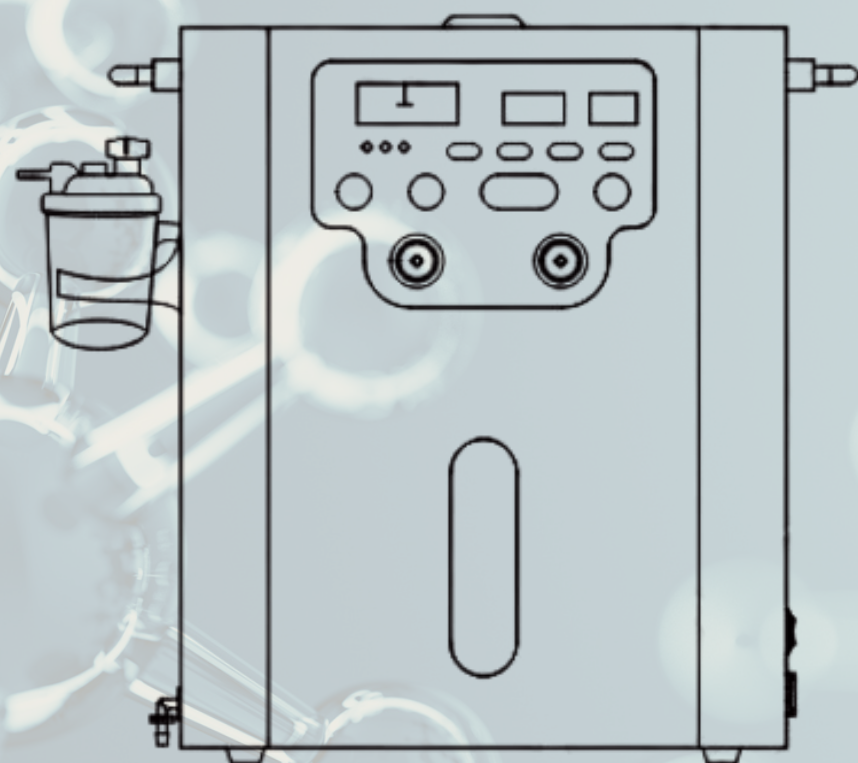

INDEKS

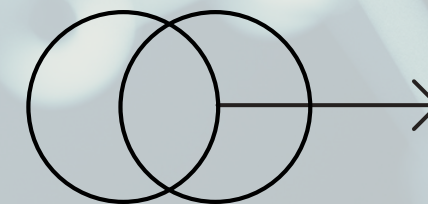

Gwarancja i serwis

H2-GEN objęty jest 24-miesięczną gwarancją obejmującą wady jakościowe. Jeśli urządzenie nie będzie działać prawidłowo w okresie gwarancyjnym, prosimy o złożenie zgłoszenia do pomocy technicznej w naszym dziale pomocy (<http://link.biorez.life/help>) lub e-mail (support@biorez.life), aby otrzymać pomoc techniczną. Jeśli urządzenie nie jest już na gwarancji i wymaga serwisu, skontaktuj się z naszym działem pomocy.

Gwarancją nie są objęte następujące sytuacje:

- uszkodzony lub uszkodzony w wyniku kontaktu.
- zdemontowane lub zmodyfikowane.
- niewłaściwe użytkowanie i konserwacja – niezgodnie z niniejszą instrukcją
- Awaria spowodowana klęskami żywiołowymi i innymi czynnikami siły wyższej (takimi jak trzęsienia ziemi, pożary, uderzenia pioruna) i innymi przyczynami.
- Upłynął okres gwarancji.
- Awaria z przyczyn takich jak instalacja, naprawa, wymiana, demontaż, nieprawidłowe napięcie wejściowe lub zanieczyszczenia przedostały się do zbiornika wody.
- Awaria spowodowana użyciem niezatwierdzonych części.
- Stosowanie opcjonalnych części lub urządzeń pomocniczych.

Jeśli urządzenie nie jest już na gwarancji i wymaga serwisu, skontaktuj się z naszym działem pomocy.

Specyfikacje techniczne

Woltaż: 110/220 VAC 60/50 Hz	Natężenie	H2 -> 1200/1000/600/400
Moc: 500 W Max	(ml/min)	O2 -> 600/500/300/200
Wymiary (cm): 318x208x378	przepływu:	99.996%
Weight (kg): 11	Stężenie Tryb	Elektroliza czystej wody
	elektrolityczny:	anodowej
	Źródło wody:	Destylowane lub demineralizowane

kontrola

Proszę sprawdzić jednostkę H2-GEN, aby upewnić się, że została dostarczona w idealnym, fabrycznie nowym stanie. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, skontaktuj się z nami natychmiast.

Sprawdź stronę 6 sprzętu, aby upewnić się, że otrzymałeś wszystkie części i akcesoria.

Usuń silikonową zatyczkę, ponieważ służy ona wyłącznie do zapobiegania wyciekaniu wody ochronnej podczas transportu. Włóż plastikową osłonę, aby móc ją używać na stałe.



Korek silikonowy



Plastikowa osłona

Dbaj o swój H2-GEN

- Należy zainstalować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie obchodź się z nim w niewłaściwy sposób. Zawsze należy postępować ostrożnie.
- Nie używać w środowiskach o wysokiej temperaturze, mokrych, korozyjnych lub radioaktywnych; w przeciwnym razie spowoduje to unieważnienie gwarancji. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie demontuj, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Jeśli nie jest używany, należy odłączyć kabel zasilający.

H2-GEN 1800 Instrukcja obsługi przez Huf Sirius do
Projekt BIOREZ Wellness, Październik 6, 2024.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Generator wodoru



Kaniula do nosa (2)



Kaniula do ucha



Okulary ochronne



Zbieracz wilgoci

Kabel zasilający
typu A lub C



Rurka spustowa



Przyrząd do wodorowania wody



Y Connector

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



TRZYMAĆ Z DALA OD OGNI

Nie pal i nie wystawiaj generatora na działanie otwartego ognia podczas użytkowania.



NIE ODWRACAJ DOŁEM DO GÓRY

Trzymaj w pozycji pionowej i pod żadnym pozorem nie przewracaj. Jeśli przestaniesz używać urządzenia na dłuższy czas, spuść całą wodę ze zbiornika. Jeśli musisz przenieść generator, najlepiej spuścić wodę, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia.



WENTYLACJA

Generator należy umieścić w wentylowanym pomieszczeniu, w pomieszczeniu zamkniętym i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza płynów.

Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 10°C i wyższa niż 30°C. Zbyt niska lub zbyt wysoka może spowodować, że generator nie będzie działał prawidłowo.

UTRZYMAJ PRZESTRZEŃ W CZYSTOŚCI

Potrzebny jest dobry przepływ powietrza. Nie umieszczaj wokół urządzenia żadnych przedmiotów, które mogą ograniczać przepływ powietrza, ponieważ może to spowodować przegrzanie, wyłączenie lub spadek stężenia wodoru. Nie wolno w żaden sposób stosować smarów ani substancji tłuszczopodobnych. Podczas pracy nie blokować przepływu wodoru z wylotu H₂. Nie skręcaj, nie zginaj ani nie zakłócaj przepływu wodoru w rurce i kaniuli.

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

Opróżnij pojemnik na wodę kaniuli z całej wody.

UŻYWAJ WYŁĄCZNIE WODY DESTYLOWANEJ LUB DEMINERALIZOWANEJ

Inne źródła wody mogą uszkodzić generator z powodu zanieczyszczeń. Za takie uszkodzenia i koszty naprawy lub wymiany odpowiada użytkownik.

NIEAUTORYZOWANE NAPRAWY I DEMONTAŻ SĄ ZABRONIONE

Nie otwieraj, nie próbuj naprawiać lub demontować generatora bez pozwolenia, w przeciwnym razie może on być narażony na pożar, porażenie prądem lub inne wypadki.

Jak używać ***H2-GEN***



Konfiguracja wstępna

W zbiorniku urządzenia może znajdować się niewielka ilość wody resztkowej. Możesz zauważyć kondensację w poziomie wody. Jeśli korek wlotu wody jest mokry, wytrzyj do sucha wilgoć wokół wlotu.



PRZED PODŁĄCZENIEM


Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją znajdującą się z tyłu urządzenia.

Zamontuj kolektor wilgoci po obu stronach generatora za pomocą mocowania śrubowego.



Dodaj wodę

Usuń tymczasową zatyczkę silikonową z dopływu wody. Za pomocą czystego lejka wlewaj do zbiornika wodę destylowaną, aż do osiągnięcia na poziomie wody oznaczenia 2000 ml. Nie napełniaj więcej niż ta ilość, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia generatora. Po dodaniu wody załóż stałą plastikową nakładkę i przekręć ją do pozycji „włączony”.

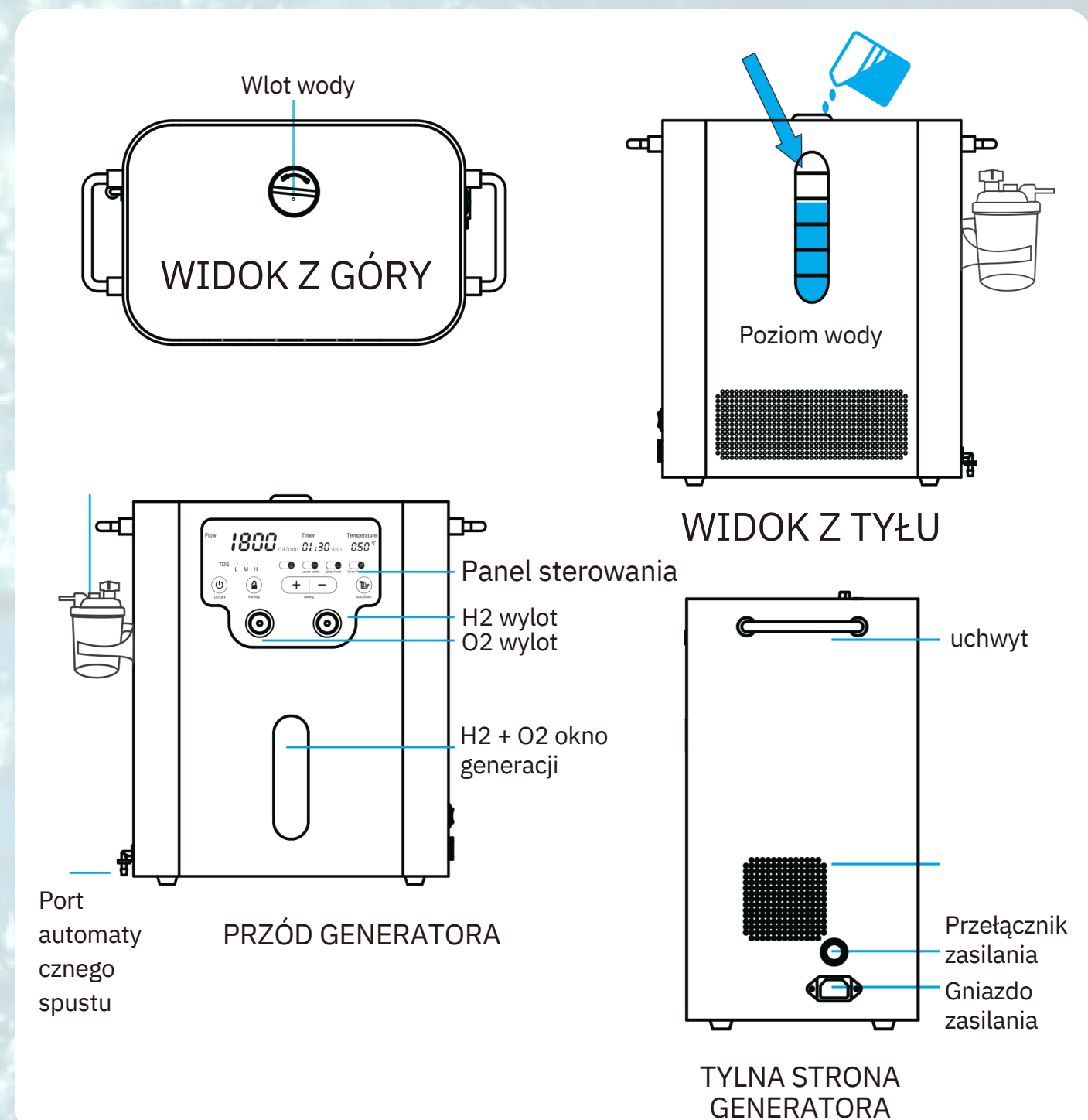

Włącz

Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego z tyłu urządzenia. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do zasilacza. Włącz czerwony przycisk zasilania nad przyciskiem gniazdka elektrycznego. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.


Dotknięcie przycisku Wł./Wył. powoduje włączenie panelu sterowania.

Połącz swoje załączniki

Podłącz złącze Y do portów wyjściowych O2 i H2.


Podłącz silikonową rurkę do złącza Y na jednym końcu i portu wlotowego kolektora wilgoci na drugim końcu.

Podłącz kaniulę (lub inną nasadkę) do portu wylotowego kolektora wilgoci.

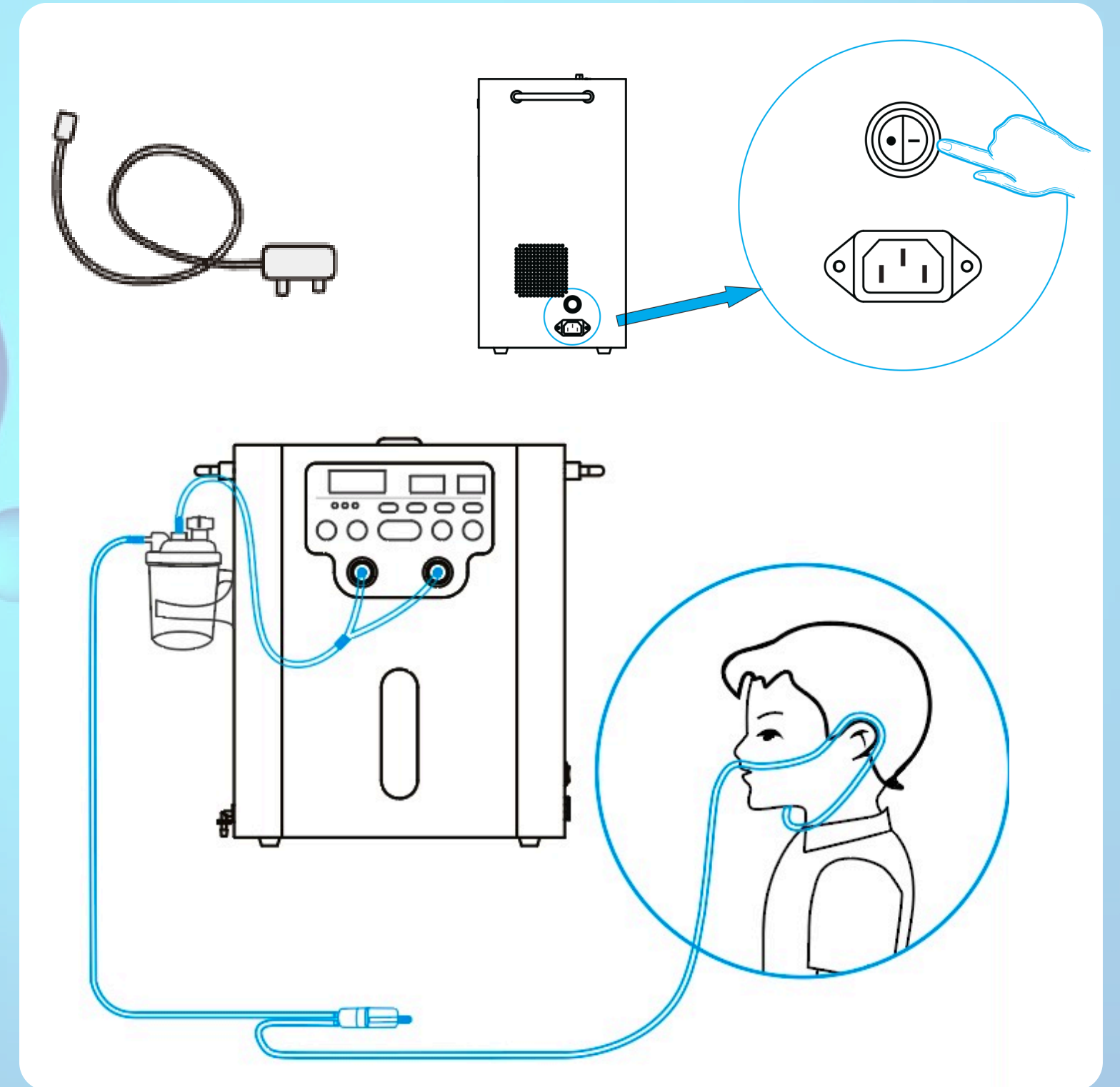

Ustaw minutnik


Przyciski Ustawienia (+/-) kontrolują czas trwania wytwarzania H₂ i O₂. Zakres timera wynosi od 1/2 do 8 godzin. Po włączeniu timera H₂-GEN rozpocznie generowanie. Timer rozpocznie odliczanie.

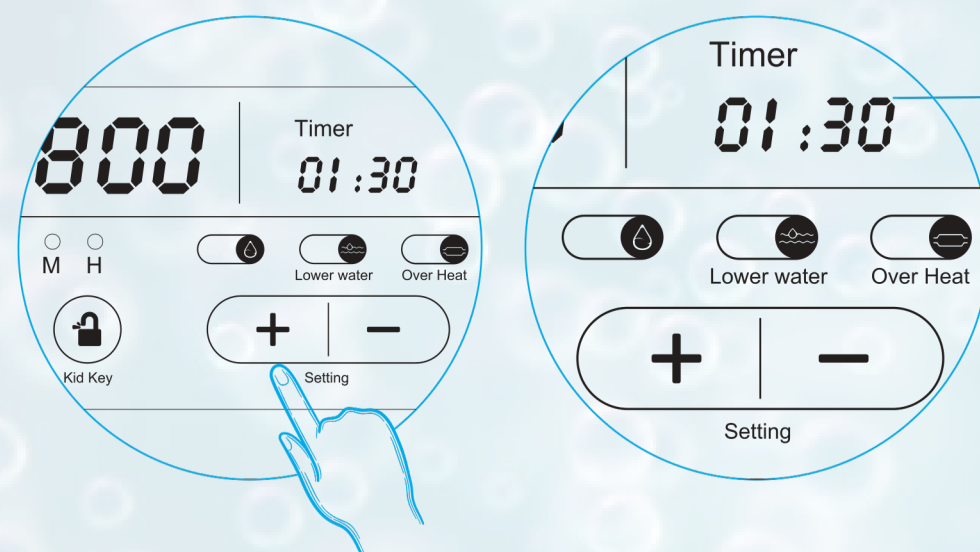

Aby wyłączyć generowanie, dotknij „Włącz/Wyłącz”

Uzupełnianie wody

Uzupełnij, gdy wyświetli się kod „E1” i zaświeci się kontrolka „Dolny poziom wody”.

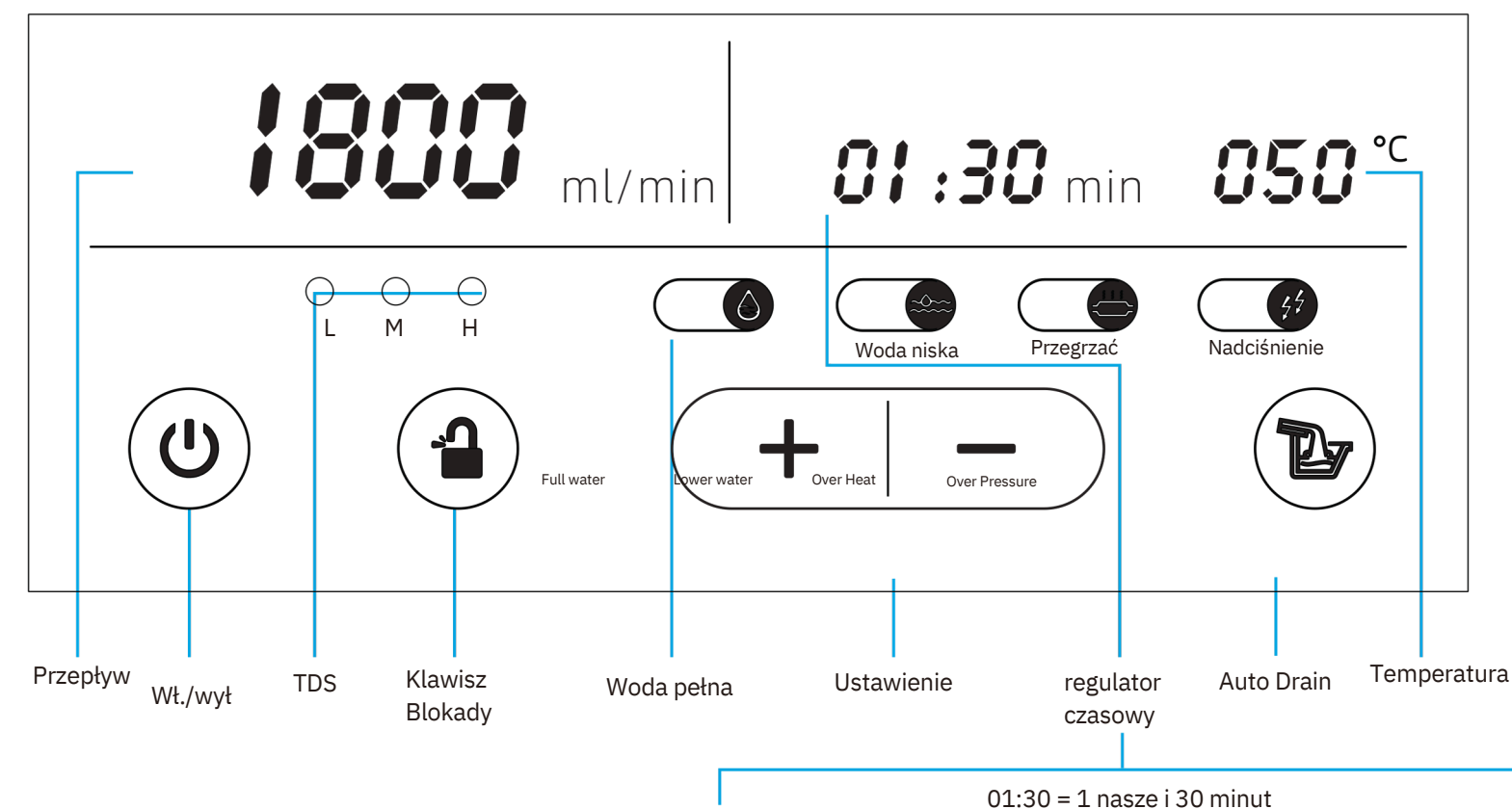


1. Wyłącz czerwony przycisk zasilania.
2. Za pomocą czystego lejka wlewaj do zbiornika wodę destylowaną, aż do osiągnięcia na poziomie wody oznaczenia 2000 ml. Nie przepełniaj.
3. Załóż ponownie nasadkę i ustaw ją w pozycji „ON”.
4. Włącz czerwony przycisk zasilania. Kod „E1” nie będzie już wyświetlany. Generator jest gotowy do użycia.

Jak spuścić wodę


1. Jeśli generator działa, naciśnij „Wł./Wył.”.
 2. Wyjmij niebieską zatyczkę z portu spustowego i podłącz rurkę spustową.
 3. Umieść drugi koniec rurki spustowej w pustym pojemniku, aby zebrać wodę.
 4. Upewnij się, że czerwony włącznik zasilania z tyłu jest włączony.
 5. Dotknąć „Automatyczny spust” na 3 sekundy, aby go uruchomić.
 6. Po zakończeniu opróżniania ponownie zamontuj korek.
- Nie pozostawiaj tego portu otwartego, ponieważ może zostać zablokowany przez zanieczyszczenia i spowodować wyświetlenie kodu zabezpieczającego E6 (patrz strona 13).

Kiedy spuścić wodę

- Wodę należy wymienić po pierwszym tygodniu stosowania.
- Jeśli jakość wody (TDS) podczas uzupełniania nie będzie spełniać standardów, na panelu wyświetli się „L”. Jeżeli tak się stanie, należy spuścić wodę i napełnić ją wodą destylowaną lub demineralizowaną z innego źródła.
- podczas transportu generatora.

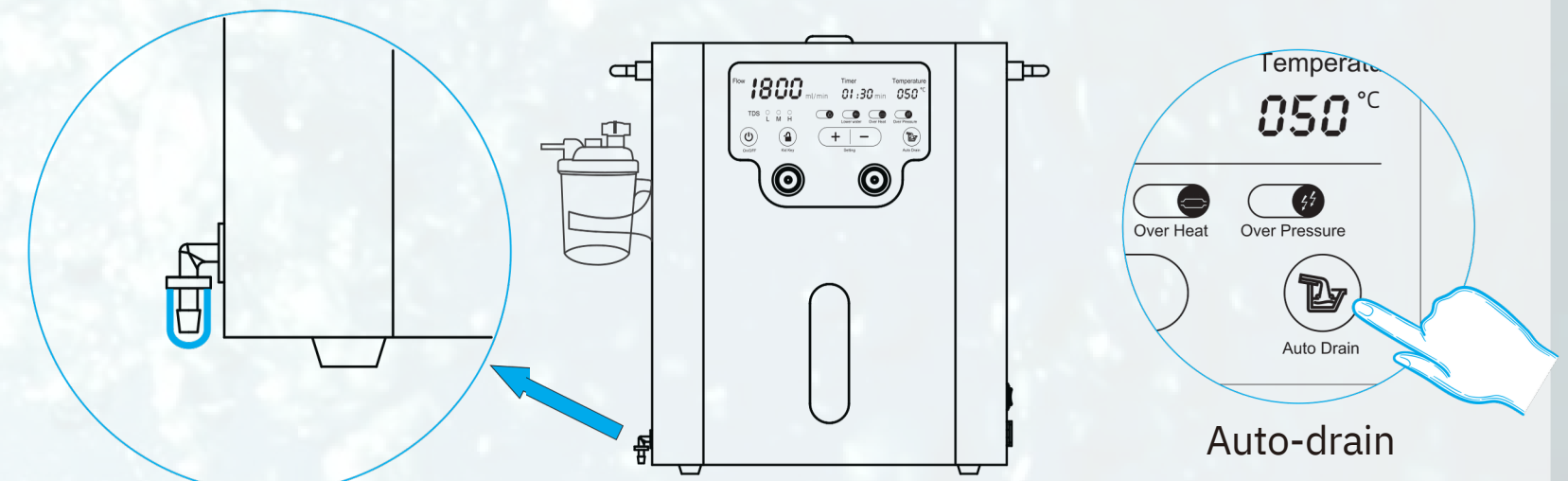

Wyjmij niebieską wtyczkę

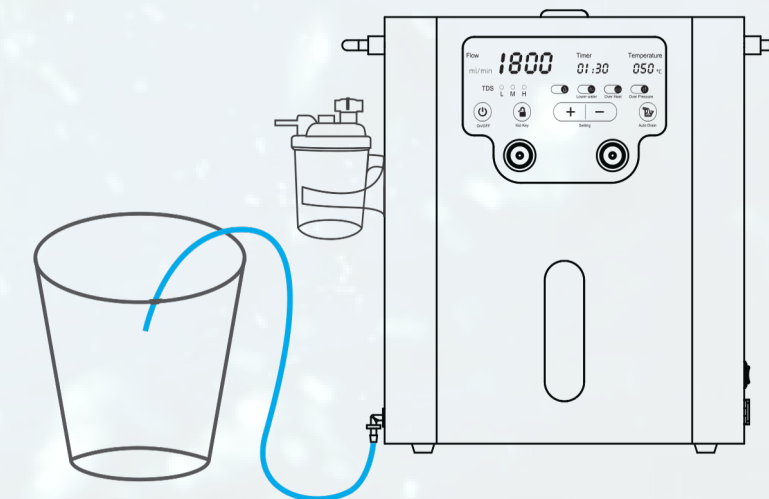


Dodatkowe wytyczne dotyczące użytkowania

Jeśli urządzenie nie będzie używane dłużej niż tydzień: wyłącz czerwony przycisk zasilania i odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i gniazdka elektrycznego.



UŻYCIE KANULI DO NOSA

- Tutaj pokazano prawidłowe użycie.
- Nie udostępniaj kaniul.
- Dezynfekuj po użyciu.*
- W razie potrzeby wymienić kaniulę.

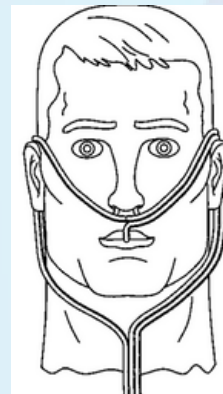

KORZYSTANIE Z GOGLI

- Odłącz końcówki douszne od kaniuli ucha i podłącz te rurki do złączy na spodzie gogli.
- Po użyciu zdezynfekuj.*



Zamontuj złącze Y na obu wlotach H2 i O2 przed użyciem do nosa, uszu i oczu.

** 3% H2O2 lub ugotować w wodzie*

WODA WODOROWA: Użyj głównego przewodu z kaniuli do ucha, aby podłączyć przyrząd do wodorowania wody do wylotu H2. Wodoruj wodę przez 5-10 minut. Wypić natychmiast, gdyż H2 szybko ulatnia się z wody.

Terminowe odprowadzanie ciepła: Wyłącz generator na minimum 1 godzinę na każde 8 godzin użytkowania.

Odpowiedni dla każdego: Dzieci i młodzież, które są poważnie chore i nie są w stanie same się o siebie zatroszczyć, powinny znajdować się pod nadzorem.


Trzaski podczas pracy: Elektryczność statyczna powstaje w wyniku tarcia lub redystrybucji ładunków spowodowanej wzajemnym przyciąganiem obciążeń elektrycznych. Podczas użytkowania elektryczność statyczna wytwarza trzaskający dźwięk, co jest zjawiskiem normalnym.

SBEZPIECZNE UŻYWANIE: Jeśli podczas użytkowania poczujesz się niekomfortowo, natychmiast przestań.

Rozwiązywanie problemów i kody zabezpieczające

Kod ochronny	Wady	Punkty kontrolne i wykluczenia
E1	Wykryto niski poziom wody	Czujnik wyłączy generator, gdy zadziała E1, aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem. Włączy się niebieski wskaźnik świetlny „Dolna woda”. Postępuj zgodnie z procedurą „Dodaj wodę”.
E2	Wykryto przegrzanie	Gdy temperatura wewnętrzna generatora jest wyższa niż 65°C, czujnik uruchomi alarm i zatrzyma wytwarzanie H2. Wyłącz czerwony przycisk i odczekaj około 30 minut przed sprawdzeniem usunięcia błędu.
E3	Wykryto wodę o niskiej jakości	Wskaźnik TDS zaświeci się. Automatyczne spuszczenie wody. Przed ponownym napełnieniem przepłucz zbiornik, trzykrotnie napełniając go i opróżniając. Wyłącz czerwony przycisk na 5 sekund i włącz go ponownie, aby ponownie zainicjować czujnik, w przeciwnym razie kod może nie zostać usunięty.
E4	Urządzenie jest przechylone.	Ustaw urządzenie na płaskiej, poziomej powierzchni.
E5	Niska temperatura wody	Usuń korek spustowy lub inną przyczynę niedrożności.
E6	Zablokowany port automatycznego spustu	Automatycznie spuść wodę i dodaj cieplejszą wodę.

Dołącz do naszego kanału Telegram,
aby otrzymywać wiadomości,
artykuły, filmy, badania i wiele więcej
na temat zdrowia
FEED WELLNESS

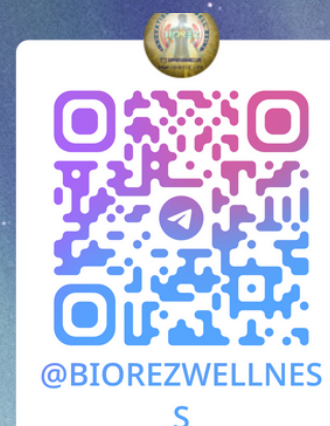A graphic showing a hand holding a glowing blue sphere. The sphere has the text 'INNOWACJE DLA ZDROWIA' curved around its top and 'BIOREZ WELLNESS' in the center. The background is a green and yellow gradient with a dotted pattern.

Nat Sirius

- +48.690.599.432
- Creatorbeing333
- nat@biorez.life
- Kolomat, Poland
- WWW.BIOREZ.LIFE
- link.biorez.life/tree